

MERCER ADA GRAB BAR

ENGLISH



- One side of the bar must be attached to a wall stud.
- Based on standard stud size, 2 of the 4 screws on 1 end of the bar must be mounted onto the wall stud.
- Product mounted on a 5/8 inch wall for contract grade customers.
- Instructions for mounting the grab bar horizontally, vertically or at an angle.
- Mounting must be done by a certified professional.
- Mounting location needs to be verified by a qualified professional to provide safety and function.
- When in use by disabled customers, another person should be around to supervised or assist.
- Grab bars are meant for assistance purpose only and not to hold/support the entire weight of any individual.
- DO NOT install this product without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand these Warnings and Instructions, contact a professional or technical personnel for assistance before attempting to install this product - otherwise, injury may occur.
- After ANY adjustments, repair or service and BEFORE use, make sure that all attaching hardware is tightened securely.
- Assist Bars add security for bath and commode areas if attached as instructed. Location, size, and angle of bars should be determined by a qualified professional to provide optimum safety and function.
- Use EXTREME caution on wet tub or floor surfaces.
- Be sure Assist Bars are correctly and securely installed. NEVER use Assist Bars if any looseness is noted.

FRANÇAIS

- Un lado de la barra debe estar unido a un perno de pared.
- Según el tamaño estándar del perno, 2 de los 4 tornillos en 1 extremo de la barra deben montarse en el perno de pared.
- Producto montado en una pared de 5/8 de pulgada para clientes de grado contract.
- Instrucciones para montar la barra de agarre horizontalmente, verticalmente o en ángulo.
- El montaje debe ser realizado por un profesional certificado.
- La ubicación del montaje debe ser verificada por un profesional calificado para proporcionar seguridad y función.
- Cuando está en uso por clientes discapacitados, otra persona debe estar cerca para supervisar o ayudar.
- Las barras de agarre están destinadas solo para fines de asistencia y no para sostener / soportar todo el peso de ningún individuo.
- N'installez PAS ce produit sans d'abord lire et comprendre cette feuille d'instructions. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ces avertissements et instructions, contactez un professionnel ou un personnel technique pour obtenir de l'aide avant d'essayer d'installer ce produit - sinon, une blessure peut survenir.
- Après TOUS les ajustements, réparations ou entretiens et AVANT utilisation, assurez-vous que tout le matériel de fixation est bien serré.
- Les barres d'assistance ajoutent de la sécurité pour les zones de bain et de commode si elles sont fixées comme indiqué. L'emplacement, la taille et l'angle des barres doivent être déterminés par un professionnel qualifié pour assurer une sécurité et un fonctionnement optimaux.
- Faites preuve d'une prudence EXTRÊME sur les surfaces mouillées de la baignoire ou du sol.
- Assurez-vous que les barres d'assistance sont correctement et solidement installées. N'utilisez JAMAIS les barres d'assistance si un relâchement est noté.

ESPAÑOL

- Un lado de la barra debe estar unido a un perno de pared.
- Según el tamaño estándar del perno, 2 de los 4 tornillos en 1 extremo de la barra deben montarse en el perno de pared.
- Producto montado en una pared de 5/8 pulgadas para clientes de grado contract.
- Instrucciones para montar la barra de agarre horizontalmente, verticalmente o en ángulo.
- El montaje debe ser realizado por un profesional certificado.
- La ubicación del montaje debe ser verificada por un profesional calificado para proporcionar seguridad y función.
- Cuando esté en uso por clientes discapacitados, otra persona debe estar cerca para supervisar o ayudar.
- Las barras de agarre están destinadas solo para fines de asistencia y no para sostener / soportar todo el peso de ningún individuo.
- NO instale este producto sin antes leer y comprender esta hoja de instrucciones. Si no puede entender estas Advertencias e Instrucciones, comuníquese con un profesional o personal técnico para obtener ayuda antes de intentar instalar este producto; de lo contrario, pueden ocurrir lesiones.
- Después de CUALQUIER ajuste, reparación o servicio y ANTES de su uso, asegúrese de que todo el hardware de conexión esté ajustado de forma segura.
- Las barras de asistencia agregan seguridad para las áreas de baño e inodoro si se adjuntan según las instrucciones. La ubicación, el tamaño y el ángulo de las barras deben ser determinados por un profesional calificado para proporcionar una seguridad y función óptimas.
- Tenga MUCHO cuidado en las superficies mojadas de la bañera o del piso.
- Asegúrese de que las barras de asistencia estén instaladas de forma correcta y segura. NUNCA use barras de asistencia si se observa alguna holgura.

Care Instructions:


- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.
- **The maximum load capacity for this product is 250 LBS (113 KGS).**
- **La capacité de charge maximale de ce produit est de 250 LBS (113 KGS).**
- **La capacidad de carga máxima para este producto es de 250 LBS (113 KGS).**

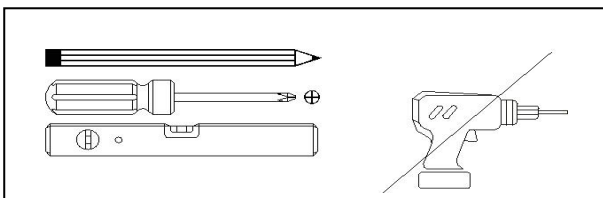


NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS

Parts Included:

Pièces incluses:



Piezas incluidas:

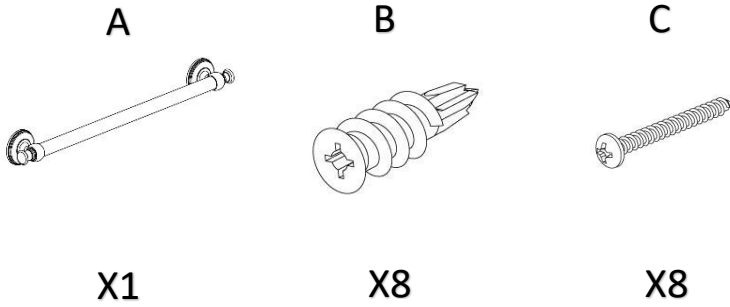



Assemble Instructions:

Assembler les Instructions:

Instrucciones de montaje:

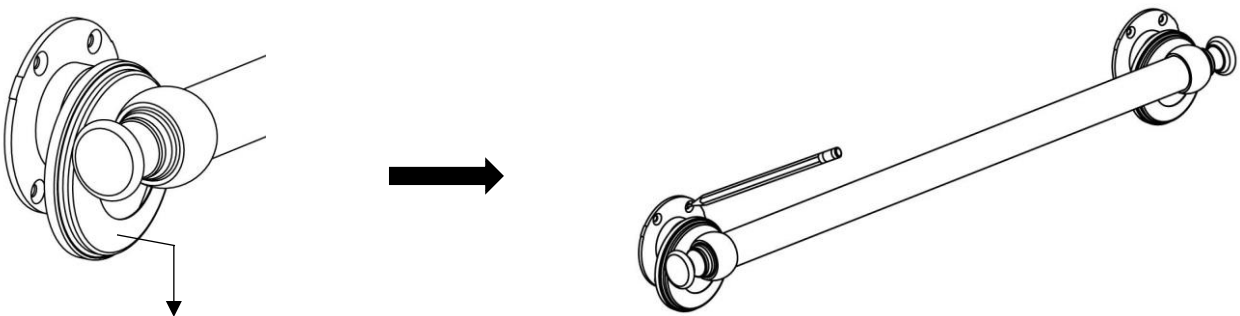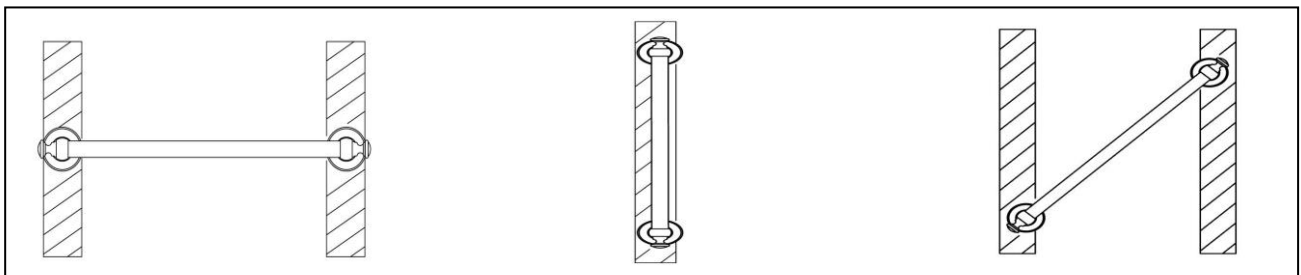

For non-stud mounting:
 Montage sur cloison
 sèche

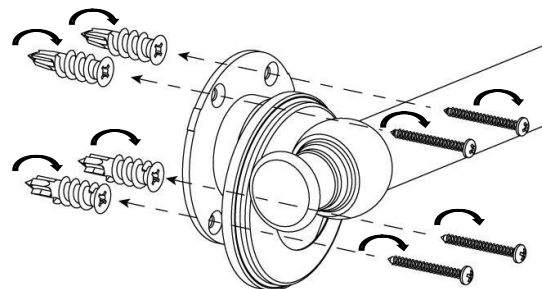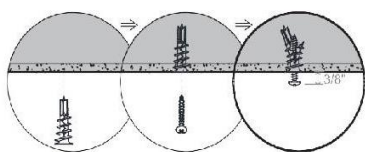

For stud mounting: Montage
sur montant : Para el
montaje en vigas:

